


Max: 300kg



HygieneSling is gemakkelijk aan te brengen en vereenvoudigt het aan- en uitkleden van de patiënt bij toiletbezoek. De band heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun van het staartbeentje tot aan het hoofd en onder de benen. HygieneSling is bedoeld voor de meeste tilsituaties waarbij de patiënt aan- en uitgekled moet worden.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.

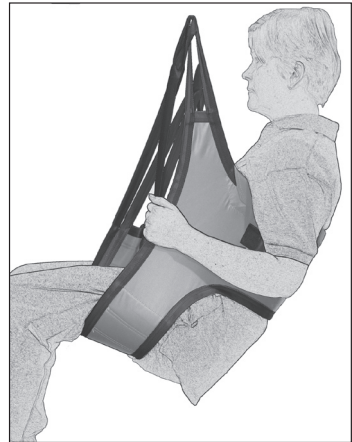

Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



Lees altijd de instructies

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.


Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.


Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in een rolstoel/stoel of in bed zit:

Om deze band te kunnen gebruiken moet de patiënt bepaalde mate van functionele controle hebben. Bij een lage spiertonus kan de patiënt mogelijk uit de tilband glijden. Wees voorzichtig.

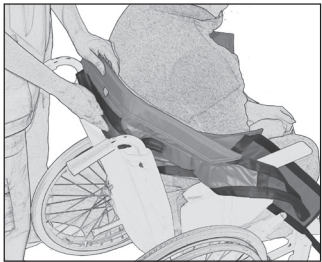


1

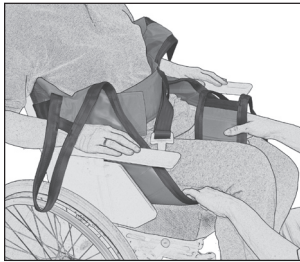

2

1. De HygieneSling wordt achter de rug en ongeveer 5 tot 10 cm onder de oksels aangebracht. Het productlabel zit midden op de tilband en moet in lijn zijn met de ruggengraat van de patiënt.
2. Zorg ervoor dat de tillussen voor het achterdeel even lang zijn als ze van onder de armen worden uitgetrokken. Dit gaat gemakkelijker als de patiënt voorover leunt of geholpen kan worden om iets voorover te leunen. Plaats de beensteunen onder de dijen van de patiënt.

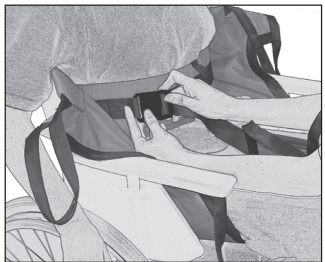


3




4

3. Sluit de gesp – een klik geeft aan dat hij goed is gesloten. Trek aan de riem om de gordel aan te trekken.
4. Kruis de beensteunen en bevestig dan de lussen van het achterdeel voordat u de beensteunlussen bevestigt. Start het heffen van de lift; stop als de banden strak staan en controleer of alles OK is voordat u doorgaat met tillen.

Verwijderen van de tilband als de patiënt zit:

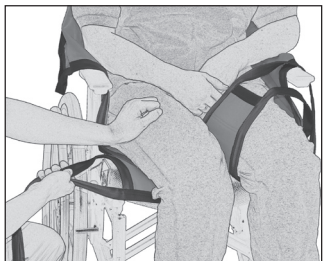


1

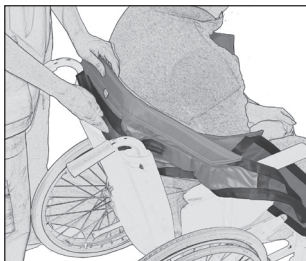


2

1. Vouw de beensteun onder zichzelf en trek hem uit aan de buitenkant van de dij.
2. Trek dan de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

Na toiletbezoek:

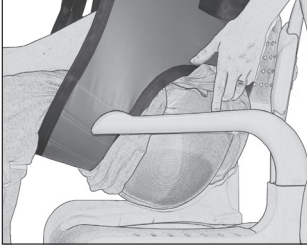

1

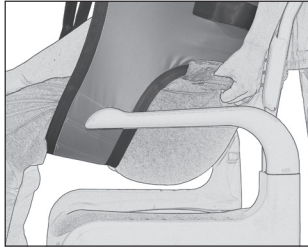


2

1. Trek de broek zo ver mogelijk omhoog.

Plaats de beensteun halverwege de knieholte en de taille gordel.

2. Til de patiënt en trek de broek omhoog. Zorg er voor dat de armen buiten de tilband zijn. Til niet hoger dan nodig.



Alternatieve plaatsing van de armen:

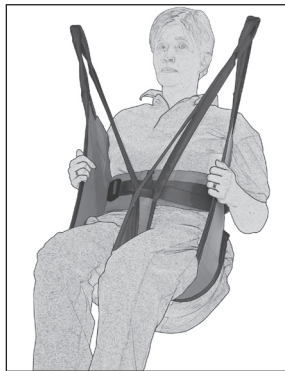

De armen worden gewoonlijk buiten de tilband gehouden, maar kunnen ook binnen de tilband worden gehouden.

Als de patiënt een lage spiertonus heeft moeten de armen buiten de band worden gehouden.

De beensteunen worden gekruisd voordat ze aan het tiljuk worden gehaakt.

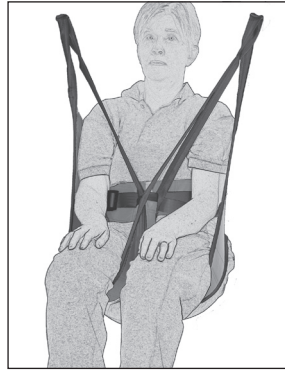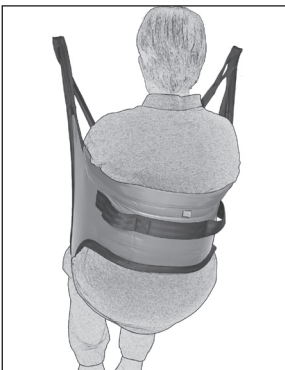

Materiaal:

Polyamide: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

Maten

Tilbanden kunnen vaak worden gebruikt voor zowel 2- als 4-punts tiljucken. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tiljuk geschikt is voor het model tilband en de status en capaciteiten van de patiënt. Als het voorkomen van infecties belangrijk is kunnen wegwerptilbanden gebruikt worden die bij slechts één patiënt worden aangebracht.

Maat		XXS/grijs	XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars	XXL/wit
Rec. gewicht patiënt	lbs	22-66	55-99	88-132	121-187	165-220,5	198-286,5	264,5-375
	kg	10-30	25-45	40-60	55-85	75-100	90-130	120-170
Tilband-hoogte	inch	19,5	25,5	29,5	34	36,5	37,5	37,5
	cm	50	65	75	87	93	95	95

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

